


パーフェクトシール 1-1073-01 ~ 06


特長

パーフェクトシールP-100型は、実用新案による簡易型攪拌シールで、スプリング使用によるシールの漏れ防止、及び耐薬品接触部分がテフロンで、ほとんどの薬品、溶媒に使用出来ます。又構造が簡単で取扱いが非常に容易な理想的な攪拌シールです。

スプリング使用により、大小各種の栓を取りかえる事が出来る為、フラスコの口径に合わせ、栓の大小及び材質（テフロン栓、ガラス栓、ゴム栓、コルク栓等）を自由に選択出来、御手持のすべてのフラスコ（すり合わせの有る無しにかかわらず）の攪拌に使用出来ます。

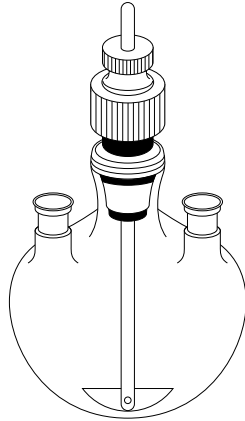

各部名称と構造図

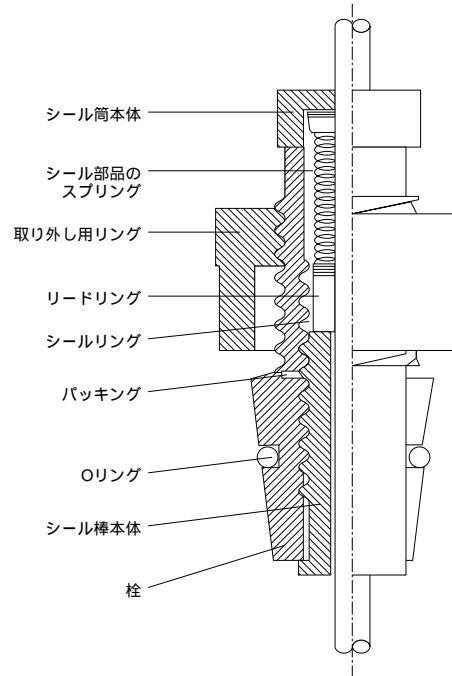

- 注：1 「栓」は手持のゴム栓、コルク栓等にコルクボラーで穴を開け、使用出来ますが、専用の栓（テフロン栓、ガラス栓、シリコン栓等）を用意しています。
- 注：2 「シールリング」は合成ゴム、バイトン等があります。
- 注：3 攪拌棒8（ガラス、テフロン、金属等）を御使用下さい。

Oリングサイズは、T-24、G-24がP-20で、T-29、G-29がP-22です。“P”とは、P規格を表します。